


Análisis de humedad completo Para laboratorio y producción



Funcionamiento intuitivo

La amplia pantalla táctil a color de 7" proporciona una manera sencilla de desplazarse por la interfaz de usuario. El operario es guiado de forma gráfica y paso a paso por el flujo de trabajo.

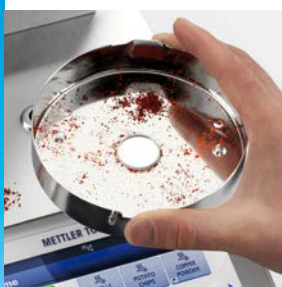

Diseño sólido y compacto

La resistente carcasa de metal y los sólidos componentes aseguran una vida útil larga del instrumento. Junto con un diseño que permite ahorrar espacio, esto convierte al HC103 en la opción perfecta para un laboratorio con mucha actividad o una planta de producción en condiciones adversas.



Acceso rápido a métodos y resultados

Los accesos rápidos permiten un acceso ágil y sencillo a un máximo de 20 métodos. Se almacenan 100 resultados por nombre de método y se pueden revisar de forma sencilla en la visión general de resultados.



Sencilla creación de informes

Los controles de producción y calidad precisan de comprobaciones periódicas de la humedad en cada lote. Imprima o exporte informes a la unidad flash USB. La gestión de ID, junto con un lector de códigos de barras, hacen que la documentación sea clara y sencilla.



HC103

Analizador de humedad halógeno

El HC103, que es apto para una variedad de industrias, funciona con una pantalla táctil con instrucciones para el usuario y acceso rápido que facilita su uso. Su diseño compacto y sólido asegura una larga vida útil del instrumento y funciona tanto en lo relativo a las aplicaciones de calidad como de control de procesos. El asistente del método integrado le ayudará a desarrollar métodos sólidos que ofrezcan resultados de muestras fiables con el mínimo esfuerzo.

Con el HC103 obtendrá:

- Tecnología de pesaje sólida
- Calefacción halógena precisa y rápida
- Funcionamiento intuitivo
- Gestión de ID
- Asistente de configuración y tutorial del instrumento

HC103

Analizador de humedad halógeno

Calefacción halógena

Control de temperatura exacto

Servicios de métodos incorporados

Desarrollo simplificado de métodos para resultados fiables

Pantalla táctil brillante y nítida

Fácil lectura

Curva de secado en tiempo real

Visión general del progreso

Gestión de ID y varias interfaces

Transferencia de datos y creación de informes prácticas

Superficies lisas de acero inoxidable

Sólidas y fáciles de limpiar

Instrucciones gráficas para el usuario

Funcionamiento intuitivo para todos los usuarios



Datos técnicos

Repetibilidad	0,10 % con muestra de 2 g
	0,015 % con muestra de 10 g
Programas de secado	Estándar y rápido
Legibilidad	1 mg, 0,01 % de MC
Memoria de métodos	20
Almacenamiento de resultados	100
% de MC recomendado	>1,0 %
Manipulación de resultados	Visión general de resultados, curva de secado en tiempo real
Gestión de ID	10 ID (introducidos manualmente o mediante lector de códigos de barras)
Seguridad	Protección de la configuración
Criterios de apagado	5 automáticos, libres, temporizados (1-480 min)
Temperatura de secado	Entre 40 y 230 °C (incrementos de 1 °C)
Modos de visualización	%MC, %DC, %AM, %AD, g, g/kg MC, g/kg DC, -%MC
Interfaces	Dispositivo USB/host USB (2), RS232
Capacidad	101 g
Desarrollo del método	Asistente del método
Idiomas	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, checo, húngaro, portugués, chino, japonés, coreano, polaco
Pantalla	Pantalla táctil a color de 7"
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	192 x 385 x 169 mm (370 mm con tapa abierta)

Accesorios para analizadores de humedad

		N.º de materia
Manipulación de muestras	Platos de muestras de aluminio	00013865
	Filtros de fibra de vidrio	00214464
Gestión de la calidad	Kit de temperatura certificado: HX/HS/HC	30020851
	Pesa de ajuste certificada de 100 g: HX/HS/HC	30406400
Otros accesorios	Cubierta de protección	30216115
	Filtros para el polvo: HC/HE/HB	11113883
	Carcasa del filtro de polvo: HC/HE	30216118
	Lector de códigos de barras (USB)	30417466
	EasyDirect Moisture (SW de recogida de datos)	30522676

Sustancia de comprobación SmartCal™

	N.º de materia
SmartCal StarterPac	30005917
cSmartCal StarterPac	30005918
SmartCal12	30005792
cSmartCal12	30005793
SmartCal24	30005790
cSmartCal24	30005791

► www.mt.com/SmartCal

METTLER TOLEDO Group

Laboratory Weighing

Información de contacto local: www.mt.com/contacts

Sujeto a modificaciones técnicas.

© 05/2023 METTLER TOLEDO. Todos los derechos reservados.

30249615B

Group MarCom RITM1025177 KA/RT

www.mt.com/Moisture

Para más información